

Abordagem prática sobre prazo de validade relacionado a eventos e rastreabilidade

The AACD logo consists of the letters 'AACD' in a bold, white, sans-serif font. The letter 'D' is stylized with a small white triangle pointing to the right, resembling a play button. The logo is set against a background of concentric, teardrop-shaped rings in shades of orange and red, which are part of a larger graphic on the left side of the slide.

AACD

vida é movimento

Enf Renata Ariano



AACD

Boas práticas no uso
das embalagens



Boas práticas no uso das embalagens













Container rígido	Grau Cirúrgico	Tyvek	SMS	Algodão tecido
06 meses	03 meses	01 ano	03 meses	07 dias

- ✓ Baseado em validações Institucionais e validado pelo SCIH
- ✓ Prazo de validade atende as exigências de órgãos oficiais e fiscalizações nacionais



Controle de Validade

- ✓ Sistema de identificação visual: tabela de conversão de cores

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
											

- ✓ Classificação mensal (prazo de validade)
- ✓ Primeiro que entra é o primeiro que sai (PEPS)



Prazo de validade

- ✓ Normatização dos tipos de embalagem (RDC 15 – art. 79)
- ✓ Acesso a área de armazenamento deve ser restrito (RDC 15 – art. 60)
- ✓ Controle do ambiente (temperatura e umidade)
- ✓ Garantia da integridade da barreira anti microbiana (embalagens)



Prazo de validade e rastreabilidade

Identificação da embalagem (RDC 15 – art. 85)

- ✓ Nome do produto
- ✓ Número do lote
- ✓ Data da esterilização
- ✓ Data limite de uso
- ✓ Método de esterilização
- ✓ Nome do responsável pelo preparo



Rastreabilidade

	CME Método: VAPOR
DATA ESTERILIZAÇÃO 14/11/14	DATA DA VALIDADE 14/02/2015
Método: VAPOR	Biológico: (+) (-)
Preparador Por: GLAUCIA BERALDO	Esterilizado Por: SONIA APARECIDA
Material: TRS	
Nº de Peças:	AUTO.: 02
CICLO: 01	LOTE: 613
Observação:	



AACD

Avanços tecnológicos



RFID

Radio Frequency Identification

RFID - Identificação por Radio Frequência - Tecnologia de comunicação sem fio que permite a identificação de uma pessoa, um objeto ou entidade na forma de um número de série único.

Essa tecnologia permite a captura de medições de temperatura e umidade através de uma “tag” específica.



RFID na Gestão de Processos


Monitoria em tempo real

► Monitoria das condições ambientais e equipamentos

- Update automático de indicadores através do acompanhamento da medições contra parâmetros pré estabelecidos.
- Geração de alertas automáticos em monitores ou através de mensagens de texto (SMS ou e-mail)
- Dados para análise histórica das medições



RFID na Gestão de Processos

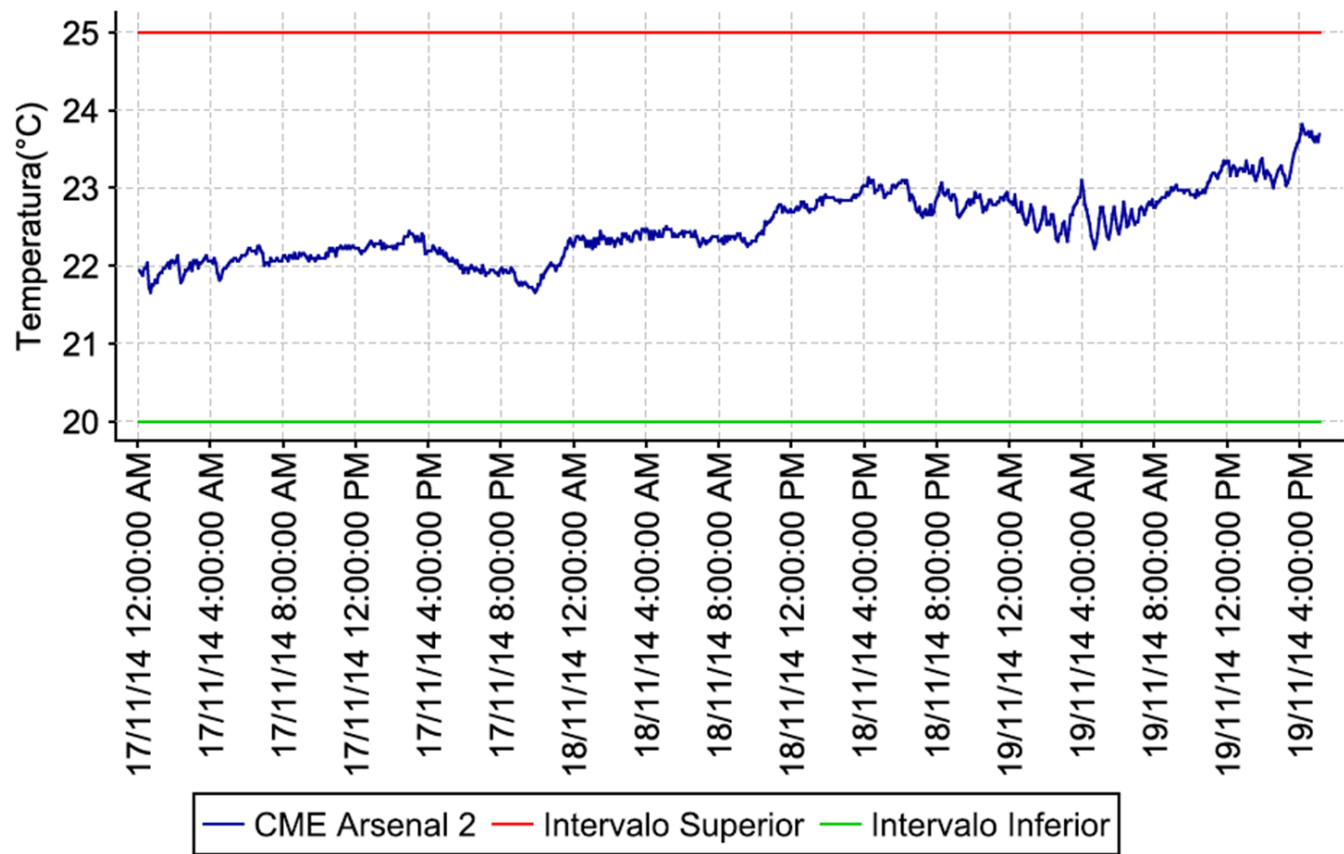

Data	Temperatura (°C)	Localização	ID de Tag
19/11/14 5:05:24 PM	23.68	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 5:00:10 PM	23.59	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 4:54:56 PM	23.65	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 4:49:41 PM	23.59	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 4:44:26 PM	23.62	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 4:39:10 PM	23.71	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 4:33:55 PM	23.65	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 4:28:39 PM	23.71	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 4:23:25 PM	23.68	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 4:18:08 PM	23.68	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 4:12:54 PM	23.75	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 4:07:39 PM	23.81	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25
19/11/14 4:02:22 PM	23.82	AACD Hospital - 6 Andar - Centro Cirurgico 6°	000CCC54DD25



Infecção Cirúrgica

Evento sentinela

Não conformidade





A criança, na sua inocência e sinceridade, só dá a mão a quem ela confia. Nosso paciente, no momento de maior fragilidade, entrega sua vida em nossas mãos. Fazemos a diferença!

OBRIGADA!

renataariano@terra.com.br



vida é movimento

